



NEO BEAUTY BCN, S.L.U  
Oficina: AVDA. CARRILET, 243, PLANTA 1,  
PUERTA 3B, L'HOSPITALET DE LLOBREGAT  
(08907 BARCELONA)  
[www.neobeautybcn.com](http://www.neobeautybcn.com)  
[info@neobeautybcn.com](mailto:info@neobeautybcn.com)  
+34 629 523 166

# MICRODERMOABRASIÓN INSTRUMENTO 2 EN 1



Art. IB-6001

## Manual de instrucciones


Estimado cliente,

Gracias por comprar este producto, el cual le ayudará con su salud y belleza. Por favor, lea las instrucciones antes de su uso.

## CONTENIDO

Panel y accesorios.....	3
Operación de martillo frío y calor.....	4
Operación de microdermoabrasión.....	5
Parámetros técnicos.....	7
Lista de empaque.....	8
Aviso de seguridad.....	9

## PANEL Y ACCESORIOS

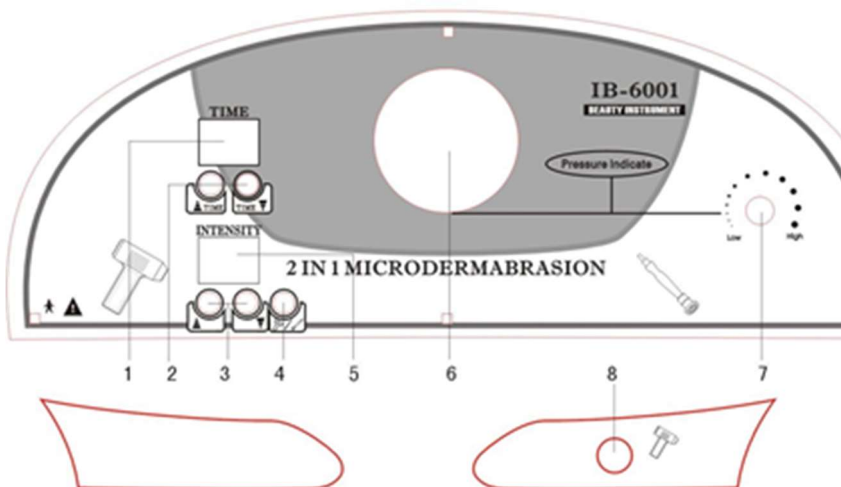

1. Tiempo
2. Ajustar el tiempo
3. Ajustar la intensidad
4. Inicio/pausa
5. Intensidad de salida

6. Intensidad de succión
7. Ajustar la intensidad de succión
8. Puerto de salida



Martillo de frío y calor

## OPERACIÓN DE MARTILLO DE FRÍO Y CALOR

### A. Cuidado básico facial:

Método de masaje:




1. Del paladar a las orejas
2. Del paladar a la nariz
3. De la nariz al punto frontal
4. Del ojo al punto central con un movimiento suave. No aplicar alrededor del ojo
5. Del punto central al área exterior.

### B. Cuidado básico corporal:

Método de masaje:  
puedes hacerlo como  
en las imágenes:

Mover el martillo frío y caliente de arriba a abajo en forma de helice. Para el cuidado del pecho, debe hacer la operación en círculo, alrededor del pecho o en dirección al músculo pectoral.

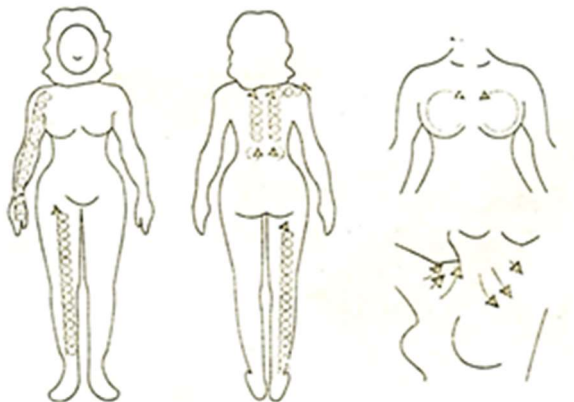

## OPERACIÓN DE MICRODERMOABRASIÓN

- Imágenes : la microdermabrasión

### Puntas de diamante

Para piel duro y grasa

D-100



D-180



D-180



D-200



D-100



Para áreas pequeñas

Para piel normal



D-200



D-200




D-150



D-200

Las mangas

El filtro

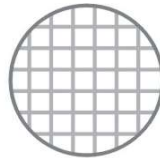

- Ensamble de la guía



3. tornillo de los cuernos

2. poner en el anillo de goma

1. poner el filtro en él diamante cabezas

## I. TEORÍA

La Microdermoabrasión exfolia la capa superior de la piel usando cristales de diamantes para lijar suavemente la piel, mientras que al mismo tiempo muda las células muertas de una manera estéril y controlada. A diferencia de la microdermoabrasión tradicional, no utiliza cristales sueltos u otros abrasivos que pueden causar irritación y reacción en piel. Por el contrario, este innovador dispositivo ofrece un tratamiento hipo alérgico usando cristales de diamante para llevar a cabo un tratamiento de exfoliación para requisitos particulares y para cada área de tu piel. Después de un tratamiento ya comenzarás a experimentar la piel más suave y más limpia.

Cuando se usa regularmente, este sistema funciona maravillosamente en la piel, en la cara, cuello, o en todo el cuerpo para un joven y pulido aspecto. Notarás resultados visibles inmediatos.

## II. PROCESO DE OPERACIÓN

1. Conectar la microdermoabrasión con el puerto de salida.
2. Elegir una cabeza de diamante adecuado, coloque el filtro de red en la cabeza de diamante y atorníllelo a la corneta.


Atención:

A) cuando está en funcionamiento, si la succión no es lo suficientemente fuerte, puede reemplazar un nuevo filtro de red. Según el tipo de piel diferente y el área de la piel, necesita diferente cantidad de filtro de red. En cada operación, es necesario llenar el filtro de red.

B) hay cabezas de diamante grandes y pequeñas, utilizar primero las cabezas de piel dura y gruesa, luego utilizar las cabezas pequeñas.

3. Al ajustar la succión, la piel más fina usa la menor aspiración. Para la bolsa del ojo y las patas de gallo, la succión debe ajustarse a lo mínimo.

4. Antes de la operación, por favor, primero probarlo en las manos, y durante la operación use los dedos para extender la piel con el fin de hacer la misma fuerza de la succión de la zona de piel. Separar la zona de cara a la izquierda y derecha, arriba y abajo, mover o rodar las cabezas de diamante como la instrucción de la imagen. Las cabezas de diamante no deben permanecer en un punto de la piel más de 15 segundos.

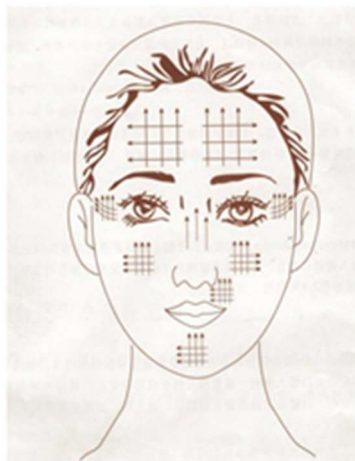

5. Tras la operación, debe utilizar el cepillo con agua para limpiar las cabezas, después de la limpieza, ponerlas en alcohol de 75% durante 15 minutos, luego sacarlo y dejar secar. Poner el esterilizador de radiación ultravioleta para el siguiente uso.

## AVISO

1. Evite rayos directos del sol.

## PARÁMETROS TÉCNICOS

Voltaje:	AC110 V	220 V	230 V	240V
Frecuencia:		50-60 Hz		
Potencia:		80 W		
Peso bruto:		7 kg		
Tamaño embalaje (cm):		55 * 38 * 20		

## LISTA DE EMPAQUE

Nombre	Unidad	Cantidad	Comentario
Unidad principal	Pieza	1	
Cable de la batería	Cable	1	
Mango de Microdermoabrasión	Caja	1	3 piezas
Cabeza Microdermoabrasión	Caja	1	9 piezas
Manguera de succión	Manguera	1	
Martillo frío y caliente	Pieza	1	
Anillo hermético	Pieza	10	
Filtro	Pieza	20	
Manual de instrucciones	Pieza	1	

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Este producto cumple lo estipulado en las siguientes directivas:

1. Las medidas de la Directiva sobre Baja Tensión: 2006/95/EC.
2. Las medidas de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética: 2004/108/EC.

## RECICLAJE

Para asegurar un tratamiento de residuos adecuado, hágalo de acuerdo con las leyes locales o según convenga para el desecho de equipos eléctricos. Esto ayudará a preservar el medio ambiente y mejorar los estándares de protección medioambiental en relación con el tratamiento de residuos eléctricos.



## AVISO IMPORTANTE DE SEGURIDAD

1. Por favor, no desmonte el equipo, ni trate de hacer alguna otra manipulación no indicada en el este manual. Todas las reparaciones deben ser realizadas por un técnico debidamente cualificado. En caso de necesitar una reparación, por favor, póngase en contacto con el proveedor.
2. Por favor, no monte ni utilice este equipo, con las manos mojadas, en las zonas húmedas o cerca del agua. No vierta líquidos en el equipo.
3. Por favor, desconecte el enchufe cuando se presenten las condiciones anteriores. Póngase en contacto con profesionales de mantenimiento si:
  - (1) El equipo ha estado en contacto con el líquido.
  - (2) El equipo tiene emite un olor anormal, humo o un alto y fuerte ruido.
  - (3) El cable está roto.
  - (4) El equipo se ha caído y se ha roto.
4. Por favor, no ponga nada en los cables, no coloque el equipo en el lugar donde alguien pueda pisar el cable.
5. Por favor, para su seguridad, desenchufe el equipo después de usarlo.
6. No coloque nada en el conector del equipo, esto puede causar fuego o cortocircuito. Si por casualidad un objeto entra en el equipo, no intente sacarlo. Pónganse inmediatamente en contacto con distribuidor
7. Si el cable de alimentación se ha dañado, solicite a un profesional que le suministre otro y lo cambie para evitar riesgos, o bien, contacte con el proveedor.
8. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, con falta de experiencia y conocimientos, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
9. Mantenga el aparato fuera de alcance de los niños.
10. La empresa se reserva el derecho de modificar la información de este instructivo.